

MEDIKRO ambi

Mobil mätenhet för omgivningsförhållanden

- ▶ Helautomatisk mätning av parametrar i omgivningen
- ▶ Realtidskorrigering av BTPS förbättrar noggrannheten
- ▶ Automatisk uppföljning
- ▶ Bekväm Plug & Play-teknologi




Produktkod: M9489

Medikro® Ambi är en systemutvidgning för Medikros spirometrisystem. Dess integrerade temperatur-, tryck- och luftfuktighetssensorer övervakar automatiskt ditt laboratorium, undersökningsrum eller annat område där undersökningen genomförs.

Ambi ökar systemnoggrannheten genom automatisk BTPS-korrigerig i realtid. Effektiviteten förbättras genom att man inte manuellt behöver uppdatera miljöfaktorerna. Ambi har konstruerats för att komplettera spirometern Medikro® Nano. Den är kompakt och tålig, och transporteras i ett anpassat Nano-fodral.



Ambi Highlights

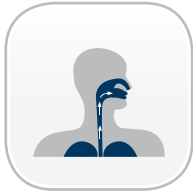

Automatisk BTPS-korrigerig i realtid

Sensorer för temperatur, tryck och luftfuktighet känner automatiskt av omgivningen och möjliggör BTPS-korrigerig i sann realtid.

Plug & Play-teknologi

Medikro Ambi ansluts till en PC eller laptop via en vanlig USB-port. Ambi-enheten identifieras automatiskt via Plug & Play-teknologi.



Kvalitetskontroll

Sparar automatiskt miljöparametrar i en kalibreringslogg och möjliggör senare kontroller och trendvisning.



Mobilitet

Medikro Ambi är den bästa lösningen för att uppgradera din mobila Medikro Nano-spirometer när du behöver kvalitet på laboratorienivå i fält. På grund av det kompakta utförandet har du kvar bärbarheten, eftersom du bara lägger till 10 gram i vikt.



Inget batteri

Medikros produkter använder datorns USB-gränssnitt för elförsörjning och standardiserad anslutning.

Praktisk transportfodral

Fodralet möjliggör enkel och säker transport för din Medikro Nano och Ambi.



Relaterade produkter



MEDIKRO® Nano
Produktkod: M9487



MEDIKRO® Primo
Produktkod: M9492

Er Medikro-representant:



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland
✉ Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com