

MEDIKRO primo

PC-baseret Office-spirometer

▶ Robust Office-spirometer

▶ Over 90 parametre

▶ Patientsikkerhed

▶ Brugervenlig



Produktkode: M9492

Medikro® Primo er et professionelt og effektivt PC-baseret spirometer til primær behandling. Systemet er nøjagtigt og enkelt at anvende og overholder alle de seneste ATS/ERS spirometristandarder.

Primo anvender Medikro® Spirometry Software (MSS). Systemet giver de praktiserende læger vished om pålidelige resultater med intuitiv navigering, justerbare fortolkningsmuligheder og en tydelig visualisering af resultaterne. Med Medikro® SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug er der ikke behov for bakteriefiltre eller sterilisering. Dette øger antallet af patienter, der kan testes, og fører til besparelser af driftsomkostningerne.



Primo Highlights



Patientsikkerhed

SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug giver sikkerhed med hensyn til infektionskontrol. Ingen udåndingsluft når ind i trykslangen eller apparatet. Dette forhindrer krydskontaminering fra patient til patient og beskytter spirometeret.

Flere beregningskriterier og fortolkningsmuligheder

MSS giver flere muligheder for beregning af Bedste PEF, FEV% og FEF. Desuden findes der fortolkningsmuligheder for ventilationsfunktion, spirometriresultat og bronchodilatationstesten.




Brugervenlig

Medikro Spirometry Software er brugervenligt og giver en intuitiv navigering og anvendelse.



Trending

Med trending-funktionen kan lægerne registrere udviklingen som funktion af tiden for en eller flere individuelle variabler. Dette gør det muligt at overvåge og dokumentere behandlingens virkning, identificere behovet for behandlingsmodifikationer og evaluere ændringerne i lungefunktion.

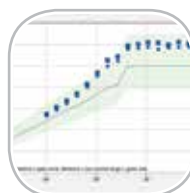

Medikro eSupport

Medikro eSupport er dit direkte link til Medikro. Der er en hurtig responstid, hvis der er problemer med support, og der gives online-hjælp 24/7. Der er en omfattende videnbasis, en interaktiv fejlfinder og et afsnit med ofte stillede spørgsmål (FAQ) og downloads.



Eksport af PDF-filer

Udskriv endelige rapporter i PDF-format eller som billeder, eller lad softwaren gøre det automatisk for dig.

Forbrugsvarer & Tilbehør



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktkode: M9256



MEDIKRO® Kalibreringsprøjte

Produktkode: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)



MEDIKRO® Ambi

Produktkode: M9489



Din lokale repræsentant fra Medikro:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com