

# MEDIKRO primo

PC-baserad spirometer för mottagningar

- ▶ Tålig spirometer
- ▶ Fler än 90 parametrar
- ▶ Hög patientsäkerhet
- ▶ Användarvänlig



Produktkod: M9492

Medikro® Primo är en professionell och effektiv PC-baserad spirometer för användning inom t ex primärvården. Det är ett noggrant och lättanvänt system som följer alla de senaste spirometrinormerna från ATS/ERS.

Primo utnyttjar programvaran Medikro® Spirometry Software. Systemet ger användaren tryggheten med pålitliga resultat med intuitiv navigering, inställbara tolkningsalternativ och tydlig visning av resultaten. Med engångsflödesgivarna Medikro® SpiroSafe behövs inga bakteriefilter eller sterilisering. Det ökar patienttillgängligheten och sparar driftskostnader.



## Primo Highlights



### Patientsäkerhet

SpiroSafe engångsflödesgivare minskar infektionsrisken. Ingen utandad luft kommer in i tryckslangen eller apparaten. Det hindrar smittöverföring mellan patienter och skyddar spirometern.


### Användarvänlig

Medikro Spirometry Software är användarvänligt med intuitiv navigering och användning.



### Flera beräkningskriterier och tolkningsalternativ

MSS ger flera alternativ för beräkning av bästa PEF, FEV% och FEF. Dessutom finns tolkningsalternativ för ventilationsfunktion, spirometriresultat och bronkodilationsundersökningar.

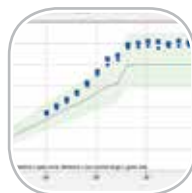

### Trender

Med trendfunktionen kan läkaren följa den historiska utvecklingen av en eller flera individuella variabler. Det gör att det går att följa och dokumentera behandlingseffekter, identifiera behov av ändring av behandlingen samt utvärdera ändringar i lungfunktionen.



### PDF-Export

Skriv ut slutrapporter i PDF-format eller som bilder, eller låt programmet göra det automatiskt.

### Medikro eSupport

Medikro eSupport är din direktlänk till Medikro. Du får en kort responstid vid supportfrågor och online-hjälp 24/7. Det finns en omfattande kunskapsbas, en interaktiv felsökare och ett avsnitt för vanliga frågor och nedladdningar. Personlig online-support finns på kontorstid.



## Förbrukningsartiklar och Tillbehör



**MEDIKRO® SpiroSafe**

Produktkod: M9256



**MEDIKRO® Kalibreringspruta**

Produktkod: M9474 (3L) / M9477 (1L)



**MEDIKRO® Ambi**

Produktkod: M9489



Er Medikro-representant:

🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉ Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com