

# MEDIKRO pro

PC-baseret laboratoriespirometer


- ▶ Alt-i-ét laboratoriespirometer
- ▶ Indbygget måling af omgivelsesbetingelserne
- ▶ Netværk & opkobling
- ▶ 3D børneincitament



Produktkode: M9488

Medikro® Pro repræsenterer state of the art præstation ved PC-baseret spirometri. Det er et nøjagtigt og præcist diagnostisk spirometer med indbyggede sensorer til måling af omgivelsesbetingelserne for automatisk BTPS-korrektion i realtid.

Pro anvender det omfattende Medikro® Spirometry Software (MSS). Systemet er som skræddersyet til læger, der har behov for et præcist spirometer med software, som i høj grad kan tilpasses, tydelig visualisering af resultaterne og fremragende netværksfunktion. Med Medikro® SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug er der ikke behov for bakteriefiltre eller sterilisering. Dette øger antallet af patienter, der kan testes, og fører til besparelser af driftsomkostningerne.

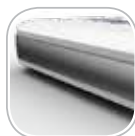

## Pro Highlights



### Frøen Freddie-incident

Medikros Frøen Freddie er det eneste animerede 3D-incident i verden. Freddie fanger børnenes opmærksomhed og ansporer til en maksimal præstation. Dette forbedrer kvaliteten af spirometriresultaterne.

### Omkostningseffektivt

Kombinationen af hardware- og softwarefunktioner og anvendelsen af SpiroSafe til engangsbrug øger antallet af patienter, der kan testes, og gør systemet omkostningseffektivt.



### Patientsikkerhed

SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug giver sikkerhed med hensyn til infektionskontrol. Ingen udåndingsluft når ind i trykslangen eller apparatet. Dette forhindrer krydskontaminering fra patient til patient, og beskytter spirometeret.



### VCT-teknologi

Slanger med Vibration Control Tubing (VCT - vibrationskontrol) udligner den signalstøj, der forårsages, hvis patienten eller slangerne flytter sig. Dette stabiliserer signalet og forbedrer den samlede kvalitet af spirometri.



### Automatiseret BTPS-korrektion i realtid

Temperatur-, tryk- og luftfugtighedssensorer registrerer omgivelsesbetingelserne automatisk, og gør en autentisk BTPS-korrektion i realtid mulig.

### Valgfri Bronkial Provokation

Anvend allerede udfærdigede protokoller for bronkial provokation, dan dem fra eksisterende protokoller eller dan helt nye protokoller.



## Forbrugsvarer & Tilbehør



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktkode: M9256



MEDIKRO® Kalibreringsprøjte

Produktkode: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland  
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland  
☎ +358 44 777 7002  
📞 +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com

Din lokale repræsentant fra Medikro: