

MEDIKRO pro

Spiromètre de laboratoire basé sur PC


- ▶ Spiromètre de laboratoire tout-en-un
- ▶ Mesure intégrée des conditions ambiantes
- ▶ Mise en réseau et connectivité
- ▶ Incitatif 3D pour les enfants



Code produit : M9488

Medikro® Pro offre des performances à la pointe de la technologie en matière de spirométrie basée sur PC. Ce spiromètre de diagnostic fiable et précis est doté de capteurs intégrés de mesure des conditions ambiantes pour une correction automatique en temps réel des conditions BTPS.

Le spiromètre Pro exploite le logiciel complet Medikro® Spirometry Software (MSS). Le système convient parfaitement aux médecins ayant besoin d'un spiromètre précis doté d'un logiciel hautement personnalisable, d'un affichage clair des résultats et d'excellentes fonctionnalités réseau. Grâce aux capteurs à usage unique Medikro® SpiroSafe, le système ne requiert pas de filtres antibactériens ni de stérilisation. Cela accroît les performances du patient et permet de réduire les coûts d'exploitation.

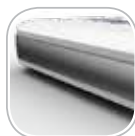

Avantages du Spiromètre Pro



Incitatif Freddie la grenouille

L'incitatif Freddie la grenouille de Medikro est la seule animation 3D au monde dans ce secteur. Freddie retient l'attention des enfants et les encourage à réaliser des performances maximales. Cela améliore la qualité des résultats de spirométrie.

Bon rapport coût-efficacité

L'association de fonctionnalités matérielles et logicielles et l'utilisation des capteurs à usage unique SpiroSafe accroissent les performances du patient et garantissent un système de bon rapport coût-efficacité.



Sécurité du patient

Les capteurs à usage unique SpiroSafe garantissent une sécurité en matière de contrôle des infections. L'air expiré ne pénètre pas dans le tube à pression ou le dispositif. Cela évite la contamination croisée de patient à patient et protège le spiromètre.



Technologie VCT

La technologie Vibration Control Tubing (VCT, tube de contrôle des vibrations) annule le bruit des signaux causé par le patient et par le mouvement de l'air dans le tube. Cela stabilise le signal et améliore la qualité globale du test spirométrique.



Correction automatique en temps réel des conditions BTPS

Les capteurs de température, de pression et d'humidité détectent automatiquement les conditions environnementales et permettent une correction en temps réel des conditions BTPS.

Provocation bronchique optionnelle

Utilisez des protocoles de provocation bronchique prêts-à-l'emploi, créez-les à partir des protocoles existants ou générez-en des nouveaux.



Consommables et Accessoires



MEDIKRO® SpiroSafe

Code produit : M9256



Seringue de calibration MEDIKRO®

Code produit : M9474 (3L) / M9477 (1L)



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlande
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlande
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com

Votre représentant Medikro local :