

# MEDIKRO pro

PC-basert spirometer for laboratorium


- ▶ Alt i ett - spirometer for laboratorium
- ▶ Integert værstasjon
- ▶ Nettverks- og forbindelseskapasitet
- ▶ 3D animasjon for barn



Produktkode: M9488

Medikro® Pro representerer det nyeste innen PC-basert spirometri. Det er et nøyaktig og presist diagnostisk spirometer med integrerte sensorer for måling av temperatur, fuktighet og trykk for automatisk BTPS-justering i sanntid.

Pro bruker den lett forståelige Medikro® Spirometry Software (MSS). Systemet passer perfekt for leger som behøver et presist spirometer med programvare som i stor grad kan tilpasses brukeren, og med klar visualisering av resultatene og ypperlig nettverkskapasitet. Med éngangs Medikro® SpiroSafe-flowtransdusere er det ikke nødvendig å bruke bakteriefilter eller utføre sterilisering. Dette øker kapasiteten for antall pasienter og sparer driftskostnader.

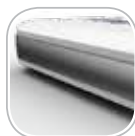

## Pro høydepunkter



### Incitamentet Frosken Freddie

Medikros Frosken Freddie er verdens eneste 3D-animasjonsincitament. Freddie fanger barns oppmerksomhet og oppmuntrer til maks. prestasjon. Det bedrer kvaliteten på spirometriresultatene.

### Kostnadseffektivt

Kombinasjonen av maskinvarens og programvarens egenskaper og bruken av SpiroSafe-éngangsprodukter øker kapasiteten for antall pasienter og gjør systemet kostnadseffektivt.



### Pasientsikkerhet

Éngangs SpiroSafe-flowtransdusere gir sikkerhet gjennom infeksjonskontroll. Ingen luft som pustes ut, kommer inn i trykkslangen eller enheten. Dette hindrer at det overføres smitte fra pasient til pasient, og dessuten beskyttes spirometeret.



### VCT-teknologi

Vibration Control Tubing (VCT) fjerner signalstøyen som forårsakes av pasientens og slangens bevegelser. Dermed stabiliseres signalet, og den kvaliteten på spirometri blir generelt forbedret.



### Automatisert BTPS-justering i sanntid

Temperatur-, trykk- og fuktighetssensorene registrerer straks omgivelsenes betingelser og muliggjør BTPS-justering i sanntid.

### Alternativ bronkial provokasjon

Bruk ferdigproduserte protokoller for bronkial provokasjon, opprett dem fra eksisterende protokoller eller generer helt nye.



## Forbruksartikler og tilbehør



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktkode: M9256



MEDIKRO® Kalibreringsprøyte

Produktkode: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Garanti og service



Din lokale Medikro-representant:

🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉ Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com