

MEDIKRO pro

Лабораторный спирометр на базе персонального компьютера


- Многофункциональный лабораторный спирометр
- Встроенные датчики для измерения параметров окружающей среды.
- Сетевые подключения и средства связи
- Трехмерный мотиватор для детей



Код Продукта: M9488

В спирометре Medikro® Pro реализованы все новейшие достижения технологии спирометрии на базе персонального компьютера. Этот диагностический спирометр с высокой точностью и воспроизводимостью измерений оснащен встроенными датчиками параметров окружающей среды для ВTPS-коррекции в реальном времени.

Работой спирометра Medikro Pro управляет многофункциональное программное обеспечение Medikro® Spirometry Software (MSS). Эта система идеально подходит для врачей, которым требуется точный спирометр с гибко настраиваемым программным обеспечением, наглядной визуализацией результатов и отличными возможностями передачи данных через компьютерные сети. При использовании одноразовых датчиков потока Medikro® SpiroSafe отпадает необходимость применения бактериальных фильтров или стерилизации. В результате увеличивается скорость обследования пациентов и снижаются эксплуатационные затраты.

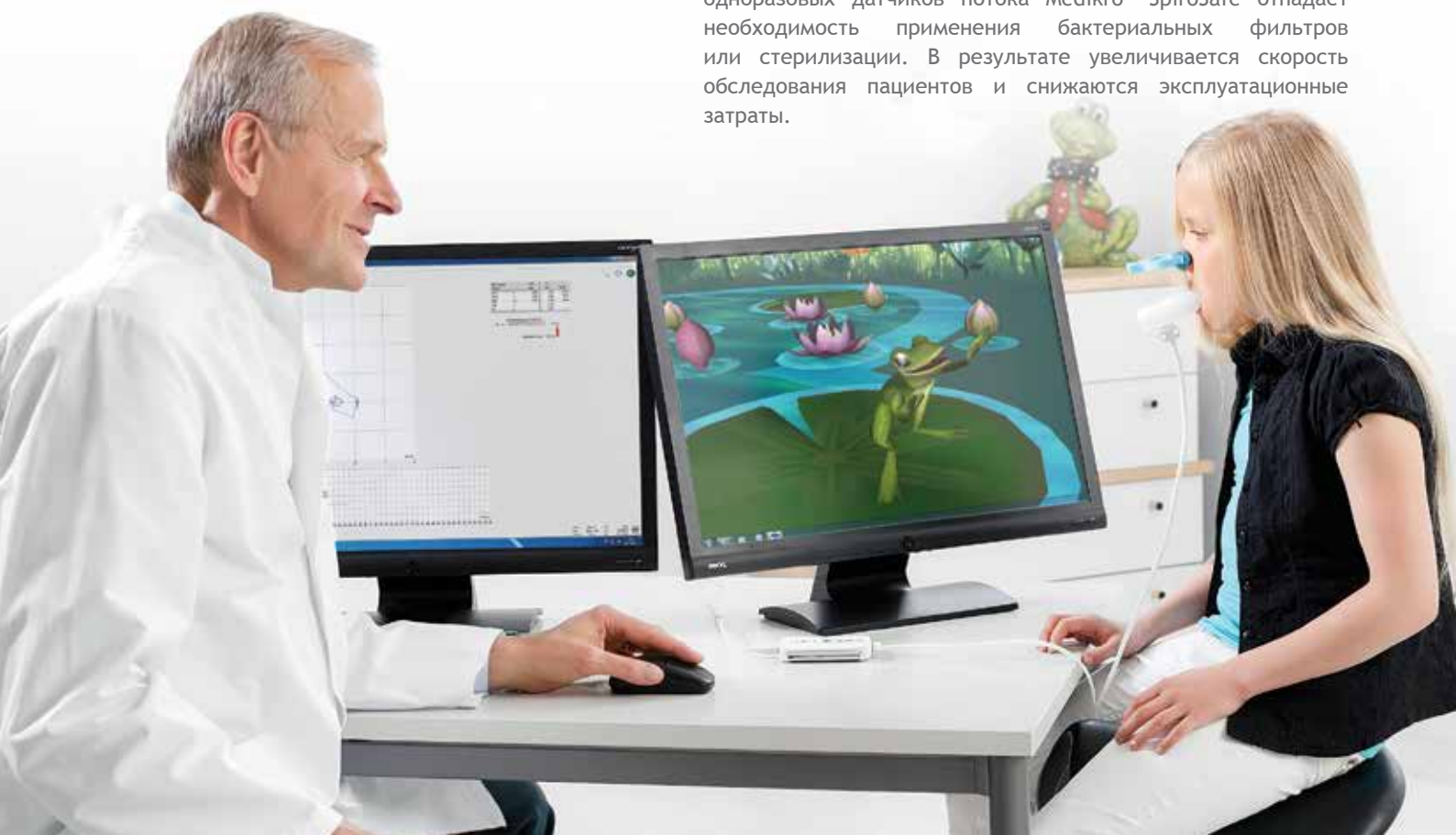

Основные Преимущества Pro



Мотиватор "Лягушонок Фредди"

Созданный компанией Medikro мотиватор "Лягушонок Фредди" - первый в мире трехмерный анимационный мотиватор. Фредди привлекает внимание ребенка и способствует максимально тщательному выполнению требований врача. Это улучшает качество результатов спирометрии.

Безопасность Пациентов

Одноразовые датчики потока SpiroSafe исключают передачу инфекций. Выдыхаемый воздух не попадает ни в трубку давления, ни в устройство. Тем самым исключается перекрестная передача загрязнений между пациентами и обеспечивается защита самого спирометра.



Экономичность

Аппаратные и программные возможности спирометра в сочетании с одноразовыми датчиками SpiroSafe ускоряют обследование пациентов и обеспечивают хорошие экономические показатели системы.



Технология VCT

Технология Vibration Control Tubing (VCT) исключает шумовую составляющую сигнала, обусловленную движением пациента и трубок. Это стабилизирует сигнал и повышает общее качество спирометрии.



Автоматическая ВТПС-коррекция в реальном времени

Датчики температуры, давления и влажности автоматически контролируют условия окружающей среды, позволяя производить точную ВТПС-коррекцию в реальном времени.



Дополнительная Возможность - Бронхопровокация

Система позволяет использовать готовые протоколы бронхопровокации, создавать новые протоколы на основе существующих, а также разрабатывать собственные протоколы с нуля.



Расходные материалы И Принадлежности



MEDIKRO® SpiroSafe

Код продукта: M9256



MEDIKRO® Калибровочный шприц

Код продукта: M9474 (3 л) / M9477 (1 л)



Местное представительство Medikro:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Куорю, Финляндия

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Куорю, Финляндия

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com