


MEDIKRO pro

Spirometro da laboratorio computerizzato

- ▶ Spirometro da laboratorio multifunzione
- ▶ Misurazione integrata delle condizioni ambientali
- ▶ Interconnessione in rete e connettività
- ▶ Incentivo bambini 3D

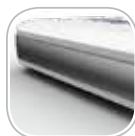

Codice prodotto: M9488

Medikro® Pro rappresenta lo stato dell'arte delle prestazioni nella spirometria computerizzata. È uno spirometro diagnostico accurato e preciso, con sensori integrati di misurazione delle condizioni ambientali per la correzione BTPS automatica in tempo reale.

Pro utilizza il comprensibile Medikro® Spirometry Software (MSS). Il sistema è la soluzione ideale per medici che richiedono uno spirometro preciso con software altamente personalizzabile, chiara visualizzazione dei risultati ed eccellenti capacità di interconnessione in rete. Con i trasduttori monouso Medikro® SpiroSafe non è necessario utilizzare filtri antibatterici, né eseguire la sterilizzazione. Ciò aumenta il flusso di pazienti trattati e consente di risparmiare sui costi operativi.



Highlight su Pro



Incentivo Freddie la rana

Freddie la rana di Medikro è l'unico incentivo animato 3D al mondo. Freddie cattura l'attenzione dei bambini e li incoraggia a fornire le massime prestazioni. Ciò migliora la qualità dei risultati spirometrici.

Conveniente

La combinazione di funzioni hardware e software e l'uso di prodotti monouso SpiroSafe aumenta il flusso di pazienti trattati e rende il sistema conveniente.



Sicurezza del paziente

I trasduttori di flusso monouso SpiroSafe garantiscono sicurezza nel controllo delle infezioni. L'aria espirata non entra nel tubo della pressione o nel dispositivo. Ciò previene la contaminazione crociata da paziente a paziente e protegge lo spirometro.



Tecnologia VCT

La tecnologia VCT (Vibration Control Tubing) annulla il disturbo del segnale causato da movimenti del paziente e del tubo. Ciò stabilizza il segnale e migliora la qualità globale della spirometria.



Correzione BTPS automatica in tempo reale

I sensori di temperatura, pressione e umidità rilevano automaticamente le condizioni ambientali e consentono l'effettiva correzione BTPS in tempo reale.

Provocazione Bronchiale Opzionale

Consente di utilizzare protocolli di provocazione bronchiale pronti per l'uso, crearli da protocolli esistenti o generare protocolli completamente nuovi.



Prodotti di Consumo e Accessori



MEDIKRO® SpiroSafe

Codice prodotto: M9256



MEDIKRO® Siringa di calibrazione

Codice prodotto: M9474 (3L) / M9477 (1L)

Rappresentante Medikro locale:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com