

Medikro Duo

TUOTEKOODI
M920

2 in 1 -laite astman ja COPD:n seulontaan

Pikatestitoiminto

Puhalluksen laadun seuranta suoraan näytöltä

Kalibrointivapaa spirometri

Pitkä akun kestävyys



MEDIKRO
Spirometry simplified



TILAUSTIEDOT

Tuotekoodi - M920


Medikro Duo –spirometri ympäristön olosuhteita mittaavilla antureilla

- M9356-180W USB-kaapeli C Plug – A Plug, pituus 1.8 m, valkoinen
- M9831 Medikro Spirometry Software
- M8304 Käyttöohje
- M8823 Asennusohje

Medikro Duo on monipuolinen laite, jota voidaan käyttää sekä astman että COPD:n seulontaan. Laitteen pikatestitoiminnon avulla seulontaspirometriatutkimus voidaan suorittaa vain 2 minuutissa. Medikron puhalluksen laadun seuranta parantaa seulontatutkimusten nopeutta ja laatua.

Medikro Duo hyödyntää helppokäyttöistä Medikro Spirometry Software (MSS) -ohjelmistoa ja samaa potilastietokantaa. MSS mahdollistaa datan monitoroinnin useilta spirometreiltä yhdellä käyttöliittymällä. Kalibrointivapaan Medikro Duo –spirometrin kanssa käytetään tuttuja, kertakäyttöisiä Medikro SpiroSafe –virtausantureita.

KOHOKOHDAT

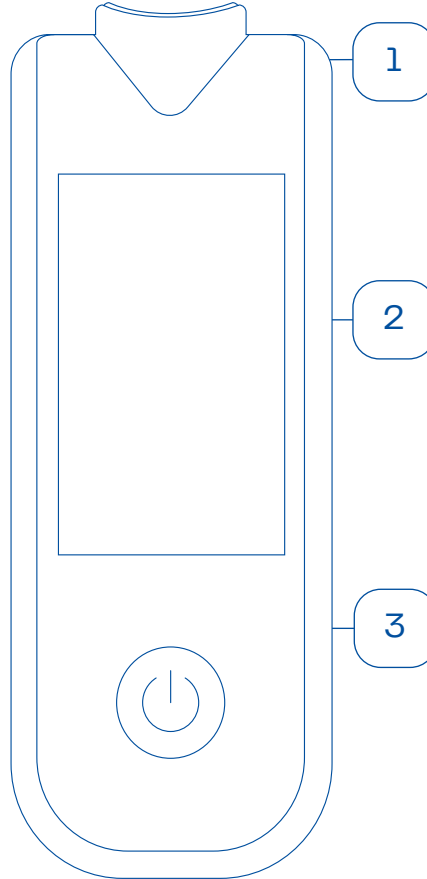

3 mittaus toimintoa

Medikro Duo on monipuolinen spirometri, joka tarjoaa kolme mittaus-toimintoa: nopea vitaalikapasiteetti (FVC), 6 sekunnin uloshengityskapasiteetti (FEV6) ja uloshengityksen huippuvirtaus (PEF).

Pikatestitoiminto

Medikro Duo on kätevä työkalu, jonka pikatestitoiminto mahdollistaa spirometriaseulonnat alle kahdessa minuutissa. Pikatestitoiminto tekee laitteesta erinomaisen vaihtoehdon kiireisille klinikoille tai ei-kliinisiin olosuhteisiin.

Luotettavat laatuindikaattorit

Medikro Duo tarjoaa kätevät graafiset laatuindikaattorit puhalluksen alun epävarmuudelle, ponnottomalle puhallukselle, yskäisylle sekä riittämättömälle puhalluksen kestolle. Medikro Duo takaa mahdollisimman tarkat ja luotettavat tulokset ilman epävarmuutta tai arvailua.

VUOSIHUOLTOSOPIMUS

Ota vuosihuoltosopimus Medikron kanssa parantaaksesi laitteidesi kestävyyttä ja luotettavuutta.

Laajennettu Takuu

Huoltosopimuksen solmivilla asiakkailla on oikeus spirometrien laajennettuun takuuseen niin kauan kuin he jatkavat laitteidensa lähettämistä vuosihuoltoon.

Stressitön huoltoaikataulu

Huolehdimme huoltoaikataulusta ja muistutamme huollosta. Voit keskittyä ydintehtäviisi, kun varmistamme laitteidesi suorituskyvyn.

ASIAKKAIDEN PALAUTE

“ Medikron järjestelmät ovat luotettavia ja kohtuuhintainen, mittaukset tarkkoja, ja ohjelmisto on hyvin suunniteltu.”

ENRIQUE CIMAS, YLEISLÄÄKÄRI

CE ISO
0537 13485



Medikro Oy
Pioneerinkatu 3
70800 Kuopio, Finland

P.O.Box 54
FI-70101 Kuopio,
Finland

+358 44 777 7003
www.medikro.fi