

Medikro Pro

TUOTEKODI
M915

Kaikenkattava PC-pohjainen diagnostinen spirometri

Automaattinen ympäristöolosuhdemittari

Turvalliset, kertakäyttöiset tarvikkeet

Verkottuva & Liitettävä

Interaktiivinen lapsipotilaan 3D-kehoteruutu






Medikro Pro edustaa suorituskyvyn huippua PC-pohjaisessa spirometriassa. Se on tarkka diagnostinen spirometri, jossa on sisäänrakennettuna ympäristöolosuhdemittausanturit automaattiseen, reaaliaikaiseen BTPS-korjaukseen.

Medikro Pro -spirometrin kanssa käytetään tuttuja, kertakäyttöisiä Medikro SpiroSafe -virtausantureita. M9293 bakteerifiltteri tarjoaa lisäsuojaa spirometriestien tekijälle SpiroSafe-virtausanturin suojatessa potilaita ristikontaminaatiolta. Molemmat tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja eivätkä ne vaadi desinfiointia eikä sterilointia. Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa sekä vähentää käyttökustannuksia.

KOHOKOHDAT

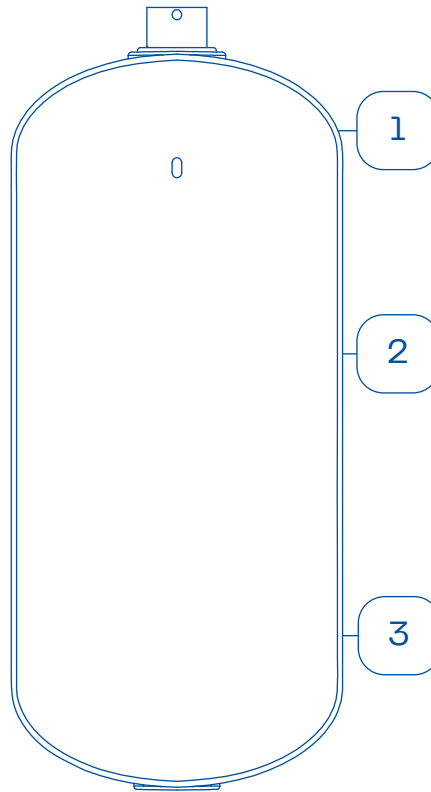

VCT-tekniikka

Vibration Control Tubing (VCT) vaimentaa potilaan liikkeestä aiheutuneen mahdollisen häiriön. Näin stabiloidaan signaalia ja parannetaan spirometriamittauksen yleistä laatua.

Automaattinen, reaaliaikainen BTPS-korjaus

Medikro Pro käyttää lämpö-, paine- ja kosteusantureita, jotka mittaavat automaattisesti ympäristön olosuhteita. Nämä anturit mahdollistavat reaaliaikaisen BTPS-korjauksen, mikä takaa tulosten tarkkuuden.

Keuhkoputkien altistuskoeläisäominaisuutena

Medikro Pro tarjoaa joustavuutta keuhkoputkien altistuskokeisiin. Voit käyttää valmiita metakoliini-, mannitoli-, juoksurasitus- jne. altistusprotokollia sekä luoda kokonaan uusia.

TILAUSTIEDOT

Peruspaketti - M985

Aloituspakkaus kulutustavaroilla

- M915 Medikro Pro -spirometri
- M9256-100 Kertakäyttöinen SpiroSafe-virtausanturi, 100 kpl
- M9264-200 Paineletku, pituus 200 cm
- Nenäpuristin, 100 kpl

Täyspaketti - M975

Kaikki osat, jotka käyttäjä tarvitsee

- M915 Medikro Pro -spirometri
- M9474 Kalibrintipumppu
- M9256-100 Kertakäyttöinen virtausanturi, 100 kpl
- M9264-200 Paineletku, pituus 200 cm
- Nenäpuristin, 100 kpl

VUOSIHUOLTOSOPIMUS

Ota vuosihuoltosopimus Medikron kanssa parantaaksesi järjestelmäsi kestävyyttä ja luotettavuutta.

Laajennettu Takuu

Huoltosopimuksen solmivilla asiakkailla on oikeus spirometrien laajennettuun takuuseen niin kauan kuin jatkuva vuosihuoltosopimus on voimassa.

Stressitön huoltoaikataulu

Huolehdimme huoltoaikatauluista ja muistutamme huollosta. Voit keskittyä ydintehtäviisi, kun varmistamme laitteidesi suorituskyvyn.

ASIAKKAIDEN PALAUTE

“ Medikron järjestelmät ovat luotettavia ja kohtuuhintaisia, mittaukset tarkkoja, ja ohjelmisto on hyvin suunniteltu. ”

ENRIQUE CIMAS, YLEISLÄÄKÄRI



Medikro Oy
Pioneerinkatu 3
70800 Kuopio

+358 44 777 7002
www.medikro.com